


## Sada pro nácvik palpce a přístupu k implantovanému portu

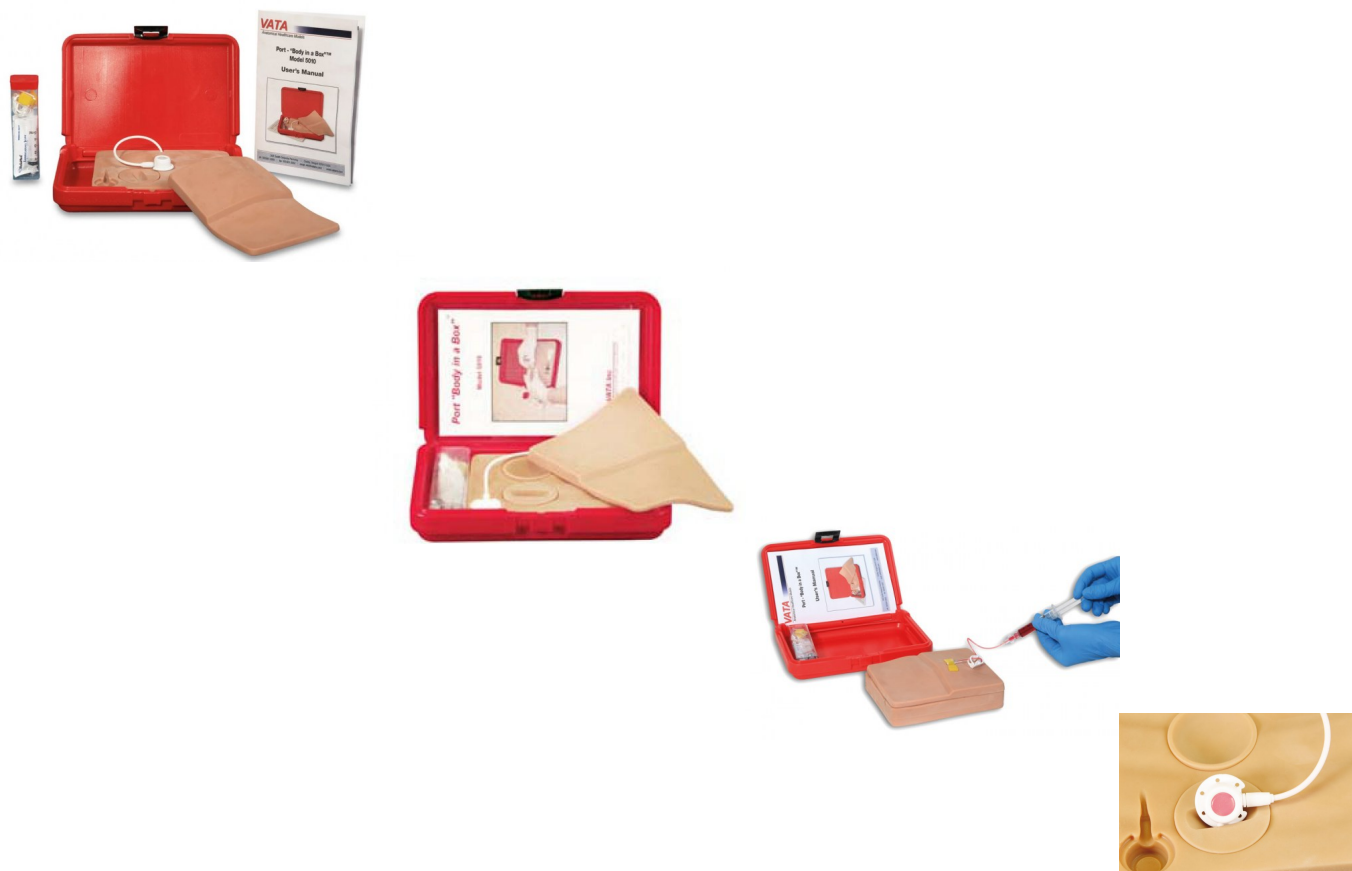

### Popis

Kompaktní, lehký a rychle sestavitelný i uskladněný. Skvělý nástroj pro nácvik, hodnocení kompetencí a hodnocení dovedností palpce portů (IVAD) a přístupu k nim. S tímto výukovým modelem je možné simulovat palpaci a přístup k implantovanému portu s následujícími umístěními: normální, „vykloněný“, „pohybující“ nebo hluboce umístěný. Úspěšný přístup je potvrzen návratem krve. Tekutinu lze injektovat i odebírat. Model obsahuje vlastní zásobník o objemu 35 cm<sup>3</sup>, který je umístěný zevnitř. Nácvik přístupu lze vyučovat a nacvičovat při umístění modelu v pouzdře nebo jej lze vyjmout při skupinovém nácviku. Dvě kulaté vložky, které se využívají k simulaci "pohybujícího" a "vykloněného" portu, jsou výměnné. Pokožka má dvě tloušťky: 64 mm umožní palpat port v průměrné hloubce, 130 mm umožní palpat port v zvýšené hloubce. Pokožka je vyrobena z bezlatexového Dermalike™, který snižuje o 50% odpor jehly při přístupu a zlepšuje odolnost proti natržení, což zvyšuje počet vpichů. Podkladový blok měkkých tkání umožňuje portu při palpaci skrze chlopeň pokožky pohyb, což přináší skutečně realistický zážitek.

Součástí modelu je reálný port s 9,6 FR katétrem, chlopeň pokožky 18 x 14 cm, blok měkkých tkání se dvěma vyměnitelnými vložkami, zásobník o objemu 35 cm<sup>3</sup>, jedna 2 cm a jedna 2,5 cm Huberovu jehla, stříkačka Luer Lock o objemu 5 cm<sup>3</sup>, tři balení lubrikačního gelu, krabička pro uskladnění spotřebního materiálu, uživatelská

příručka a pevné ABS pouzdro o rozměrech 24 x 16,5 cm.