


## Trenažér péče o střeva a podávání klystýru

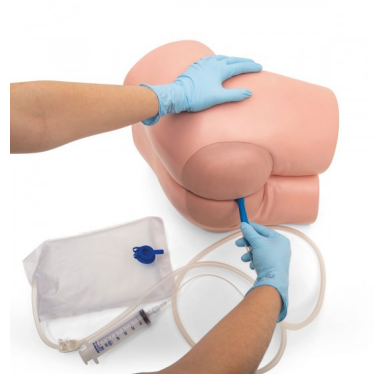

### Popis

Vysoce kvalitní trenažér v životní velikosti pro realistický nácvik podávání klystýru a zajištění péče o střeva. Zdokonalení nácviku péče o pacienty v nemocnici snižuje riziko komplikací spojených se péčí při dysfunkci dolního střeva a zajištěním bezpečnosti pacienta.

Ekonomický Trenažér péče o střeva a podávání klystýru od 3B Scientific® je vynikající volbou pro optimalizaci dovedností studentů a pečovatелů díky přímé zpětné vazbě

vedoucí ze způsobu provádění klystýru. Různé funkce simulátoru umožňují účastníkům během nácviku provádět různé postupy. Bezpečný zásobníkový systém zajišťuje těsnost přenosného trenažéru. Rovněž je možný nácvik mytí za využití tuhé i řídké stolice. Díky rychlému a snadnému nastavení (

Nácvik následujících postupů:

- Provedení klystýru
- Čištění
- Retenční klyzma
- Zpětný tok
- Léčebný klystýr
- Zavedení čípků
- Zavedení léčiv
- Digitální rektální vyšetření (DRE) a stimulace (DRS)
- Digitální odstranění stolice (DRF)

Technické vlastnosti trenažéru:

- Tento vysoce kvalitní trenažér simuluje hýždě pacienta v levé boční poloze s částmi stehem, řitním otvorem a střevem.
- Horní část hýždí je měkká a flexibilní pro zvýšení realističnosti; účastník ji musí zvednout, aby získal přístup ke konečníku
- Umožňuje zavádění katétrů 16CH až 40CH a rektálních katétrů s balónkem
- Různé vložky pro digitální vyšetření jsou vyrobeny ze pevného silikonu SKINlike™, který simuluje lidskou pokožku a tkáň během vyšetření DRE a stimulace DRS
- Řitní otvor zůstává sevřený a zůstává uzavřený i po odstranění katétru z důvodu vysoce kvalitního materiálu vložky
- Obsahuje dva 3D (trojrozměrné) anatomické didaktické modely hemoroidů pro usnadnění vysvětlení komplikací nebo kontraindikací:
- jeden zobrazující přední část rekta s hemoroidy, análními trhlinami a píštělemi
- druhý z vnějšího pohledu s oteklým análním prolapsem a hemoroidovými uzly
- 3D modely jsou připevněny k modelu pomocí magnetu, proto si studenti mohou model snadno předávat mezi sebou
- Zabezpečený systém na tekutinu:
- zajišťuje přenositelnost, nepropustnost, bezpečnost
- zavádění standardních klystýrových roztoků až do objemu 2 litrů
- tekutinu lze vypustit do sběrného zásobníku nebo přímo do umyvadla nebo nádoby
- snadné čištění
- Optimalizovaný design umožňující rychlou a jednoduchou instalaci pro každý nácvik
- Obsahuje přepravní tašku a úložný box pro různé spotřební materiály a moduly

Rozměry a hmotnost: 3,8 kg; 55 x 35 x 32 cm

Obsah dodávky:

- Trenažér péče o střeva a podávání klystýru
- Zabezpečený sběrný zásobník na tekutinu
- 1 vyšetřovací (DRE), 1 stimulační (DRS) a 1 vložka pro odstranění stolice (DRF)
- 2 magnetické 3D anatomické modely hemoroidů
- Umělá tuhá stolice
- Tuhá stolice (150 g) a rozpustný přípravek (60 g) pro přípravu stolice
- Špachtle a nádoba pro přípravu stolice
- Láhev koncentrované krve (250 ml)
- Nádoba s injektorem na umělou krev
- Tálkový pudr (100 g), vazelína
- Plastový úložný box na spotřební materiál
- Taška na přenášení

